



MEDICO 2000 e l'Integrazione PICENUM STUDY

Installazione ed Uso





Installazione 'Estrazione Dati Picenum Study'

- Andare sul sito <http://www.mediatec.it> e cliccare nell'area *Download*;
- Da qui cliccare su *Plug-in, Add On e Utility di Medico 2000..*;
- Andare alla voce *Estrazione Dati Picenum Study* e salvare il Setup sul Desktop;
- Con Medico 2000 chiuso aprire l'icona *SetupPicenum.exe* e cliccare *Avanti*;



- Scegliere il percorso d'installazione dove si trova Medico 2000 (solitamente C:\Programmi\Medico 2000), e fare clic su **Avanti**. Successivamente cliccare su **Installa**, attendere il completamento del SetupPicenum.exe ed al termine selezionare il tasto **Fine** (Vedi Figure).

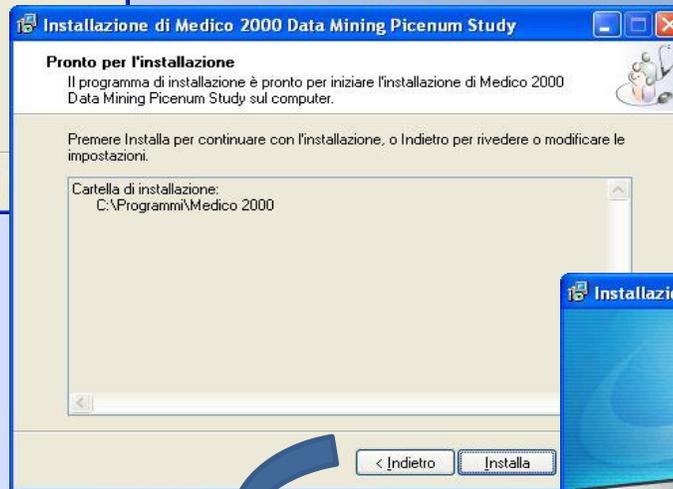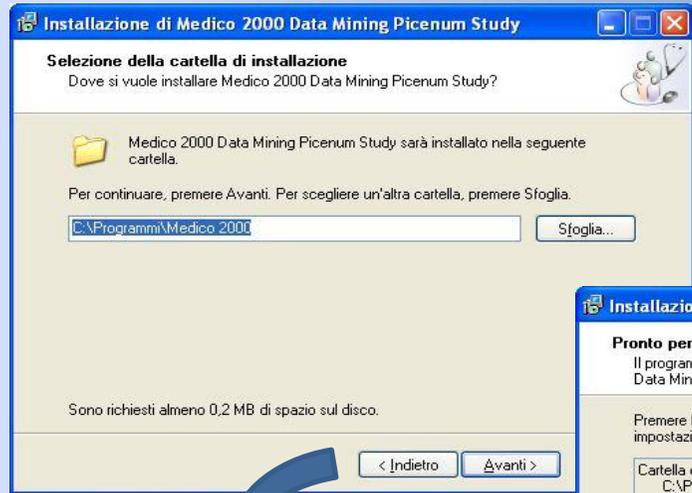

Guida all'Estrazione Dati Picenum Study


Da oggi è possibile rilevare ed avere una panoramica generale sui dati di tutti i pazienti presenti in archivio, grazie ad un nuovo strumento chiamato *Data Mining Picenum Study*. Il nuovo estrattore, creato secondo l'iniziativa lanciata dal centro studi della FIMMG, è uno strumento molto potente in grado di effettuare ogni tipo di ricerca.

Per procedere alla vera e propria Estrazione con Medico 2000, seguire le istruzioni:


- Aprire Medico 2000 e dal menu *Servizio* selezionare *Cartella Servizio*;




- Da Cartella Servizio fare doppio clic sulla voce *Estrazione Dati (Data Mining)*;

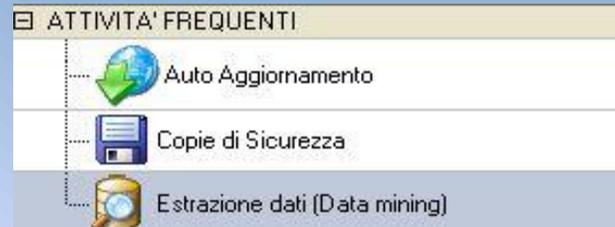


- All'apertura della finestra Estrazione Dati, fare clic sul campo in alto a sinistra <Selezionare..> ed indicare tra la lista delle ricerche *Picenum*;

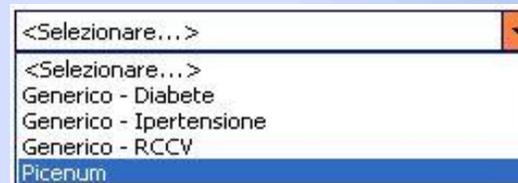

- Alla selezione della ricerca, l'estrattore inizierà ad *elaborare* i dati (vedi barra di scorrimento in Figura);

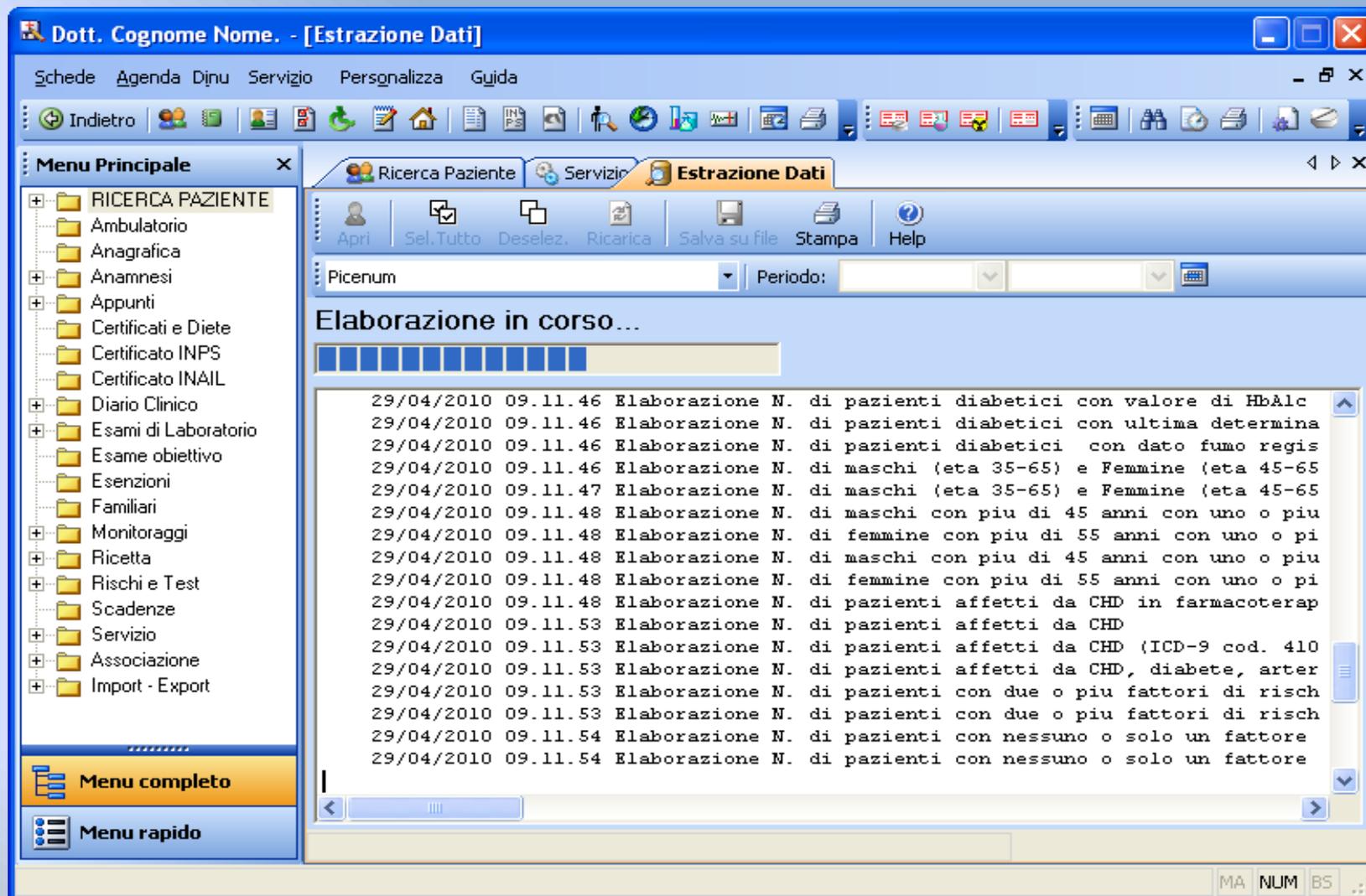

- Al completamento dell'Elaborazione comparirà il tasto *Visualizza* (Vedi Figura). Fare clic su quest'ultimo per avere i risultati della ricerca.

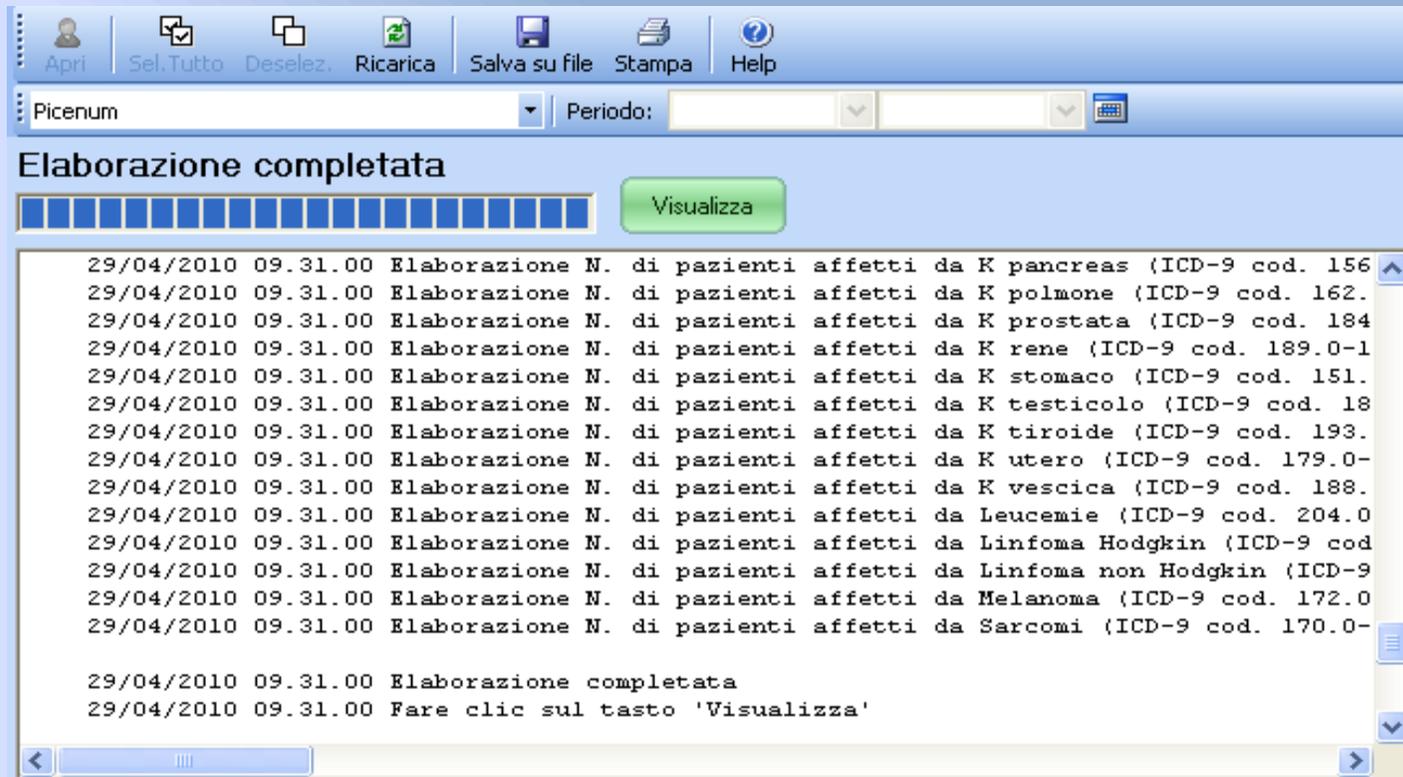

- La lista verrà popolata coi risultati dell'*Estrazione Picenum*.

NOTA: I dati di questa tabella non sono modificabili in quanto frutto di elaborazione. Tuttavia ce ne sono alcuni che Medico 2000 non è in grado di estrarre perché non presenti, a quei dati è possibile apportare una modifica permanente (Campi Verdi). Dove si trovano i ***campi evidenziati in verde***, con un doppio clic sulla riga desiderata, si ha la possibilità di modificare quel campo (Vedi Figura).

The image shows two screenshots of the Medico 2000 software interface. The top screenshot displays a window titled 'Picenum' with a menu bar (Apri, Sel. Tutto, Deselez., Ricarica, Salva su file, Stampa, Help) and a 'Periodo:' dropdown. Below the menu is a table with the following data:

Campi	
Numero assistiti	1611
Assistite femmine 0-9 anni	5
Assistite femmine 10-19 anni	47
Assistite femmine 20-29 anni	88
Assistite femmine 30-39 anni	127
Assistite femmine 40-49 anni	167
Assistite femmine 50-59 anni	

The bottom screenshot shows a similar window with a table of patient statistics. The row 'N. di pazienti affetti da CHD fumatori avvisati sul pericolo e che ricevono l'invito a smettere' is highlighted in green. A blue arrow points from the selected row in the top window to this highlighted row in the bottom window.

N. di pazienti affetti da CHD fumatori	1
N. di pazienti affetti da CHD fumatori avvisati sul pericolo e che ricevono l'invito a smettere	
N. di pazienti affetti da CHD con dato fumo registrato	1
N. di pazienti affetti da Iperensione Arteriosa (ICD-9 cod. 401.0 - 405.9)	512
N. di popolazione di eta maggiore = a 21 anni sottoposta a misurazione PA negli ultimi 2 anni	17
N. di popolazione di eta maggiore a 21 anni	2195
N. di pazienti ipertesi sottoposti a rilevazione pressoria nei precedenti 6 mesi	53
N. di pazienti ipertesi sottoposti a dosaggio della creatininemia, nel precedente anno)	1

N. di pazienti affetti da CHD fumatori avvisati sul pericolo e che ricevono l'invito a smettere

- Per poter salvare l'esito della ricerca, fare clic sul tasto *Salva su file*.
Come da figura, indicare il percorso dove si desidera creare il file di testo (*.txt) e fare clic su *Salva*.

The screenshot shows a software application window with a menu bar and a data table. The menu bar includes 'Apri', 'Sel.Tutto', 'Deselez.', 'Ricarica', 'Salva su file', 'Stampa', and 'Help'. A blue arrow points to the 'Salva su file' button. Below the menu bar is a search bar with 'Picenum' and a 'Periodo:' dropdown. The main area contains a table with patient statistics. The row 'N. di pazienti affetti da K testicolo (ICD-9 cod. 186.0-186.9)' is highlighted. Below the table, the text 'N. di pazienti affetti da K testicolo (ICD-9 cod. 186.0-186.9)' is displayed. In the foreground, a 'Salva su file' dialog box is open, showing 'Desktop' as the save location. The dialog box has a sidebar with 'Documenti recenti', 'Desktop', 'Documenti', 'Risorse del computer', and 'Risorse di rete'. The main area shows 'Documenti', 'Risorse del computer', and 'Risorse di rete'. At the bottom, the 'Nome file:' field contains 'Estrazione Picenum' and the 'Salva come:' field contains 'File Testo'. The 'Salva' button is highlighted with a blue arrow.

Descrizione	Valore
N. di pazienti affetti da K prostata (ICD-9 cod. 184.0-185.9)	7
N. di pazienti affetti da K rene (ICD-9 cod. 189.0-189.1)	1
N. di pazienti affetti da K stomaco (ICD-9 cod. 151.0-151.9)	1
N. di pazienti affetti da K testicolo (ICD-9 cod. 186.0-186.9)	0
N. di pazienti affetti da K tiroide (ICD-9 cod. 193.0-193.9)	2
N. di pazienti affetti da K utero (ICD-9 cod. 179.0-182.9)	1
N. di pazienti affetti da K vescica (ICD-9 cod. 188.0-189.9)	0
N. di pazienti affetti da Leucemie (ICD-9 cod. 204.0-208.9)	0
N. di pazienti affetti da Linfoma Hodgkin (ICD-9 cod. 201.0-201.9)	
N. di pazienti affetti da Linfoma non Hodgkin (ICD-9 cod. 202.0-202.9)	
N. di pazienti affetti da Melanoma (ICD-9 cod. 172.0-172.9)	

N. di pazienti affetti da K testicolo (ICD-9 cod. 186.0-186.9)

Salva su file

Salva in: Desktop

Nome file: Estrazione Picenum

Salva come: File Testo

- Una volta che il file verrà salvato ('File salvato con successo!') cliccare su *Ok*.

The screenshot shows a software interface with a menu bar (Apri, Sel.Tutto, Deselez., Ricarica, Salva su file, Stampa, Help) and a data table. A dialog box titled 'Medico 2000' is overlaid on the table, displaying the message 'File salvato con successo!' and an 'OK' button.

Picenum		Periodo:
N. di pazienti con pregresso Ictus, affetti da cardiopatia ischemica	0	
N. di pazienti con pregresso Ictus, con fibrillazione atriale o precedente episodio di fibrillazione atriale (ICD-9 cod.	0	
N. di pazienti con pregresso Ictus con dato fumo e BMI registrato	0	
N. di pazienti con pregresso Ictus con ECG, assetto lipidico, creatininemia, glicemia effettuati negli ultimi 3 anni	0	
N. di pazienti con pregresso Ictus con terapia in atto con antitrombotici (cod. ATC B01AC; B01AA)	0	
N. di pazienti con pregresso Ictus con terapia in atto con ACE inibitori o sartanici	0	
N. di pazienti con pregresso Ictus con PA = 140/90 mmHg negli ultimi 9 mesi	0	
N. di pazienti con pregresso Ictus con valore LDL > 190 mg/dl o con LDL > 160 mg/dl con terapia in atto o con LDL > 190 mg/dl con interruzione negli ultimi 3	0	
N. di pazienti affetti da asma bronchiale (ICD-9 cod. 491.01/00)	51	
N. di pazienti affetti da asma a cui vengono prescritti farmaci per il controllo a lungo termine dell'asma	0	
N. di pazienti affetti da asma sottoposti a vaccinazione antipneumococcica	0	
N. di pazienti affetti da asma bronchiale con dato spirometrico	0	
N. di pazienti affetti da asma bronchiale con spirometria eseguita nel precedente anno	6	
N. di pazienti affetti da BPCO (ICD-9 cod. 496; 491.2/00; 491.21/00)	42	
N. di pazienti affetti da BPCO sottoposti a spirometria nel precedente anno	0	
N. di pazienti affetti da BPCO sottoposti a emogasanalisi nel precedente anno	0	
N. di pazienti affetti da BPCO sottoposti a vaccinazione antipneumococcica nei precedenti 5 anni	0	
N. di pazienti affetti da K testicolo (ICD-9 cod. 186.0-186.9)		

A questo punto il file è pronto per essere inviato.